


4CN.442.00AP

SOSTEGNO SIMMETRICO AD ANGOLO IN NYLON ADIPOSE

Questo prodotto contribuisce ai crediti LEED®

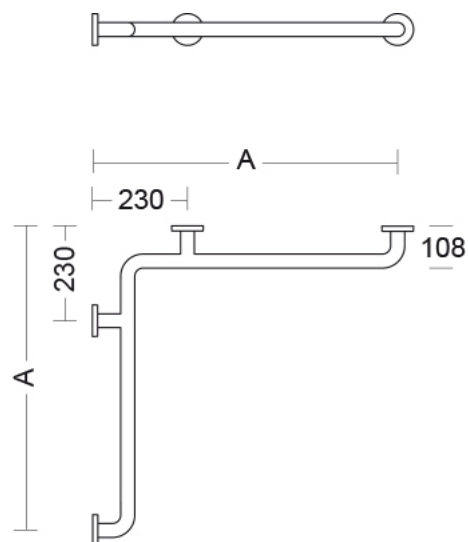

Dimensioni: 760 (800) * x 760 (800) * x 108 * mm Sostegno di sicurezza ad angolo simmetrico "Adipose" costituito da elementi rettilinei in poliammide PA6 con anima interna di rinforzo continua in alluminio e da elementi curvi in poliammide PA6 con anima interna in acciaio inox. Fissaggio a muro a mezzo rosette Ø 80 mm in poliammide con flangia interna in acciaio inox e coperchio copriviti a scatto in poliammide con foro per avvitamento con utensili. Rosetta da fissare con 3 viti e tasselli di fissaggio a muro. Ausilio completo di kit di fissaggio su calcestruzzo, pietra naturale e mattone pieno con viti in acciaio inox. Assicurarsi che i fissaggi dell'ausilio e la tipologia di parete siano idonei al carico previsto. Lunghezza orizzontale 760 (800) * mm x 760 (800) * mm. Sporgenza 108 * mm. Diametro impugnatura Ø 36 mm. Diametro rosette Ø 80 mm. Spessore rosette 13.5 mm. (dimensioni di massimo ingombro)
 * Il materiale plastico utilizzato non presenta effetti citotossiciti (Test condotti secondo EN ISO 10993-5). Articolo conforme ad EN12182 (Prodotti destinati all'assistenza di persone con disabilità)

4CN.442.00AP


SOSTEGNO SIMMETRICO AD ANGOLO IN NYLON ADIPOSE

Polyamide 6

- .A1 - BIANCO PLUS
- .01 - BIANCO
- .02 - BISCOTTO
- .03 - GIALLO PASTELLO
- .04 - GIALLO
- .05 - BLU PASTELLO
- .07 - GRIGIO
- .09 - ROSSO
- .10 - NERO
- .17 - ANTRACITE

CERTIFICAZIONI

 Ce

 Kg 300

This product is only offered in a European format